



*Innowacyjne
rozwiązania na
rynku polskim*



katalog produktów

iORTO
PROFESSIONAL



To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją
używania lub etykietą.

Dlaczego warto wybrać MAZBIT?

Tradycja i doświadczenie

Mazbit to rodzinna, polska firma, która od 1992 roku nieprzerwanie rozwija się w branży ortopedii. Od trzech dekad projektujemy i produkujemy wkładki ortopedyczne, łącząc wiedzę ekspertów z innowacyjnymi technologiami, takimi jak druk 3D. Dzięki temu tworzymy rozwiązania precyzyjnie dopasowane do potrzeb pacjentów i zapewniające najwyższą jakość.

Jakość doceniana w kraju i za granicą

Od początku stawiamy na jakość, która stała się fundamentem marki Mazbit. Nasze wkładki są cenione przez specjalistów w Polsce i na wielu rynkach zagranicznych. Regularnie uczestniczymy w sympozjach i konferencjach branżowych, dzieląc się wiedzą i wspierając rozwój nauki w dziedzinie ortopedii i podologii.

Kompleksowe wsparcie

Dbamy o wszystkie strony procesu terapeutycznego:

- **Pacjenci** mają dostęp do szerokiej gamy wkładek – od komfortowych, przez profilaktyczne i specjalistyczne, aż po indywidualnie dopasowane.
- **Placówki** zyskują nie tylko produkty, ale także materiały marketingowe, ekspozycje oraz dedykowanego opiekuna handlowego i wsparcie naszych ekspertów: konsultanta medycznego, podologa i technika ortopedy.
- **Pracownicy** korzystają ze szkoleń stacjonarnych i online, materiałów edukacyjnych oraz systemów motywacyjnych, które wspierają rozwój zawodowy.

Mazbit - partner na lata


Łączymy tradycję, wiedzę i innowacje, aby dostarczać rozwiązania, które realnie poprawiają zdrowie i komfort pacjentów.



KONSULTANT MEDYCZNY:

+48 609 864 635

✉ gabinety@mazbit.pl

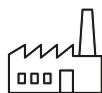

PRODUCENT:



MAZBIT

ul. R. Szláfroka 18,
63-000 Środa Wlkp. PL



DZIAŁ HANDLOWY:

+48 61 285 13 07

✉ biuro@mazbit.pl



Poznajmy się!

Zeskanuj kod i zobacz film
na naszym kanale **YouTube**
<https://bit.ly/3T6djJZ>



Nasze linie produktowe

Mazbit oferuje szeroką gamę produktów, które dbają o zdrowie i komfort stóp. Przyjrzyjmy się im bliżej:

Diagnostic



Linia **Diagnostic** to nowoczesny sprzęt diagnostyczny, niezbędny w profesjonalnych gabinetach. Znajdziesz tu zaawansowane urządzenia, takie jak maty tensometryczne, które precyzyjnie oceniają rozkład nacisków na stopach, pomagając w dokładnej diagnozie i planowaniu leczenia.



dowiedz się więcej →



iORTO Professional



iORTO Professional to kompleksowy system, który pozwala na zdiagnozowanie pacjenta i wykonanie indywidualnych wkładek ortopedycznych w zaledwie 30 minut, wszystko podczas jednej wizyty. To przełomowe rozwiązanie dla osób potrzebujących natychmiastowego wsparcia i precyzyjnego dopasowania.




dowiedz się więcej →



iORTO Individual



Wkładki **iORTO Individual** to odpowiedź na potrzeby pacjentów wymagających spersonalizowanych rozwiązań, ale z możliwością zdalnego wykonania. Są one tworzone na podstawie dokładnej diagnozy przeprowadzonej w gabinecie, a następnie dostarczane do klienta.

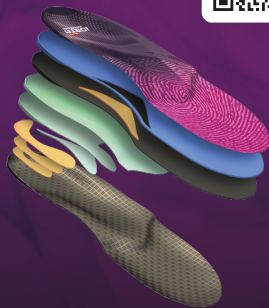

dowiedz się więcej →



iORTO Medic



Linia **iORTO Medic** to serijne wkładki ortopedyczne, które wyróżniają się innowacyjnością i zaawansowaną technologią. Dzięki ciągłym badaniom i rozwojowi, Mazbit dostarcza produkty zapewniające skuteczne wsparcie i komfort w codziennym użytkowaniu.



dowiedz się więcej →



iORTO Elegance



Linia **iORTO Elegance** to nowoczesne wkładki ortopedyczne stworzone z myślą o eleganckim obuwiu damskim i męskim. Zapewniają prawidłowe ustawienie stopy, amortyzację i odciążenie nervalgicznych punktów, dzięki czemu zwiększają komfort, redukują ból i zmęczenie nawet po całym dniu chodzenia.



dowiedz się więcej →



Protection



W linii **Protection** znajdziesz szeroki wachlarz produktów żelowych i ortez, które zapewniają ochronę, amortyzację i stabilizację. Są idealne dla osób potrzebujących wsparcia po urazach, w profilaktyce kontuzji, czy po prostu w celu zwiększenia komfortu chodzenia.




dowiedz się więcej →



Profilactic



Profilactic to wkładki profilaktyczne, stworzone z myślą o zapobieganiu problemom ze stopami. Pomagają w utrzymaniu prawidłowej postawy, równomiernym rozłożeniu ciężaru ciała i zapobieganiu powstawaniu schorzeń, takich jak płaskostopie czy halluksy.

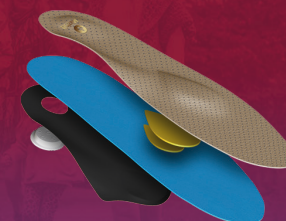

dowiedz się więcej →



Comfort



Wkładki i akcesoria z linii **Comfort** podnoszą wygodę codziennego użytkowania obuwia. Mazbit oferuje także rozwiązania dla bardziej wymagających osób aktywnych zawodowo oraz sportowców, dla których maksymalny komfort ma kluczowe znaczenie podczas intensywnych działań i treningów.



dowiedz się więcej →



iORTO Professional

	MODEL	Strona	Zastosowanie główne	Tęgość	Elastyczność łuku	Amortyzacja
ACTIVE	CITY SLIM	16	Stopa zmęczona	SLIM	★★★	★★★☆☆
	CITY	17	Stopa zmęczona	STANDARD	★★★	★★★☆☆
	HARD WORK	18	Ból pięty / ból kolana	STANDARD, SPACE	★★★☆☆	★★★★★
SPORT	RUN	19	Bieganie	NH-SPACE	★★★	★★★☆☆
	MULTISPORT	20	Sport i rekreacja	STANDARD	★★★☆☆	★★★☆☆
	BOOTSPORT	21	Narciarstwo / Wrotkarstwo	STANDARD, SPACE	★★★☆☆	★★★★★
MEDIC	SUPPORT	22	Płaskostopie podłużne	STANDARD, SPACE	★★★☆☆	★★★☆☆
	TOTAL SUPPORT	23	Płaskostopie podłużne i poprzeczne	STANDARD, SPACE	★★★☆☆	★★★☆☆
	HEEL SUPPORT	24	Ostroga piętowa / ból pięty	STANDARD, SPACE	★★★☆☆	★★★★★
	SOFT	25	Stopa cukrzycowa / wrażliwa	STANDARD, SPACE	★★★☆☆	★★★★★
	KID	26	Koślawość / szpotawość	STANDARD, SPACE	★★★☆☆	★★★☆☆
	POZABIEGOWA	27	Odciążenie odcisków/ran	NH-SPACE	nie dotyczy	★★★★★

TABELA WYMIARÓW BAZ iORTO PROFESSIONAL

TĘGOŚĆ SLIM:

Rozmiar	Jednostka [mm]*	35/36	37/38	39/40	41/42	43
Długość		242	256	269	282	287,5
Szerokość przodostopia		89	92	96,5	99	100

TĘGOŚĆ STANDARD:

Rozmiar	Jednostka [mm]*	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
Długość		236,5	250	261,5	275	289	301,5	313
Szerokość przodostopia		83	87	90	93,5	96	100	102

TĘGOŚĆ NH-SPACE:

Rozmiar	Jednostka [mm]*	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
Długość		253	265	278	293	307	320
Szerokość przodostopia		95	99	104	107	109,5	113

TĘGOŚĆ SPACE:

Rozmiar	Jednostka [mm]*	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
Długość		242	255,5	270	282	295	308	320
Szerokość przodostopia		89	92	96	100	104	106	108

TĘGOŚĆ STANDARD KID:

Rozmiar	Jednostka [mm]*	31/32	33/34	35/36
Długość		210	224	238
Szerokość przodostopia		74	79	85

TĘGOŚĆ SPACE KID:

Rozmiar	Jednostka [mm]*	31/32	33/34	35/36
Długość		216	230	243,5
Szerokość przodostopia		80	84	85

*Tolerancja +/- 2mm.

iORTO Professional to zaawansowany system ortopedyczny, który podnosi standardy diagnostyki i zaopatrzenia pacjentów w indywidualne wkładki termoformowalne. Skonstruowany z myślą o placówkach medycznych, wyróżnia się szeregiem innowacyjnych cech, które sprawiają, że jest niezastąpiony dla profesjonalistów chcących szybko i skutecznie wspierać pacjentów z różnymi schorzeniami ortopedycznymi.



Główne cechy **iORTO Professional**:

1

Diagnostyka pacjenta i produkcja wkładek podczas jednej wizyty (30 minut):


System umożliwia kompleksową diagnostykę pacjenta oraz ekspresową produkcję spersonalizowanych wkładek termoformowalnych, eliminując potrzebę wielokrotnych wizyt.



2

Łatwy i precyzyjny sposób diagnozy:

Dzięki prostym a zarazem profesjonalnym narzędziom, diagnostyka staje się precyzyjna, umożliwiając odpowiednie dostosowanie wkładek do indywidualnych potrzeb pacjenta.

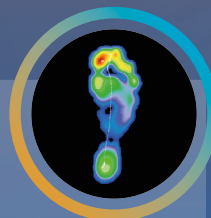

3

Prostota obsługi narzędzi:

Narzędzia do produkcji wkładek są zaprojektowane z myślą o łatwości obsługi, umożliwiając personelowi medycznemu efektywne korzystanie z systemu.



4

Dowolna wizualizacja wyściółki - produkt jedyny w swoim rodzaju:

Istnieje możliwość naniesienia na wkładki wyściółki wierzchniej z dowolną grafiką. Jest to niezwykle atrakcyjny sposób brandowania wkładek barwami i logiem własnego gabinetu.



5

Wkładki komfortowe lub korekcyjne:

iORTO Professional pozwala na tworzenie zarówno wkładek zapewniających głównie komfort, jak i typowo korekcyjnych, dostosowanych do specyficznych potrzeb każdego pacjenta.



6

Pełna indywidualizacja i szerokie zastosowanie:

System oferuje szeroki zakres możliwości, umożliwiając zaopatrzenie pacjentów z nie tylko najczęstszymi, ale także rzadkimi schorzeniami ortopedycznymi. W ofercie posiadamy szeroką gamę gotowych elementów korekcyjnych i odciążających, a także arkusze materiałów technicznych do samodzielnej obróbki.



7

Możliwość wielokrotnej edycji wyprofilowań:


Wkładki są wielokrotnie formowalne, dzięki czemu po zaformowaniu poprzez miejscowe dogrzenie można dostosować ich kształt, a w przypadku całkowicie nieudanego formowania, ponownie rozgrzać całą bazę oraz uformować je na nowo.



8

Niski koszt wyposażenia gabinetu/pracowni ortopedycznej:

iORTO Professional to ekonomiczne rozwiązanie, umożliwiające gabinetom wysoce opłacalną inwestycję w nowoczesną technologię.

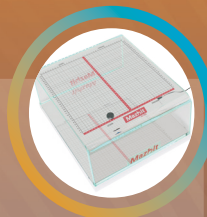

9

Atrakcyjne formy finansowania:

Placówki medyczne mogą skorzystać z różnorodnych form finansowania, co przynosi natychmiastowy zysk bez angażowania dużych środków pieniężnych.



10

Wysoka dochodowość ze sprzedaży wkładek:

System generuje wysokie dochody ze sprzedaży spersonalizowanych wkładek, co bezpośrednio przekłada się na korzyści finansowe dla placówki.



11

Wsparcie szkoleniowe i handlowe:

Personel medyczny otrzymuje wsparcie szkoleniowe i handlowe ze strony menadżera linii, co umożliwia skuteczne wykorzystanie potencjału systemu.



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Wiktor Frąckowiak

Technik ortopeda, Podolog
Menedżer linii

Zadzwoń +48 519 109 052

Napisz w.frackowiak@mazbit.pl



Pacjent otrzymuje wkładki, które są dokładnie dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, co skutkuje maksymalnym komfortem podczas noszenia oraz efektywnością terapeutyczną. Ich dynamiczny rdzeń zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania oraz wspiera aktywizację mięśni stopy, co przekłada się na poprawę jej ogólnej sprawności ruchowej i efektywności pracy. Dzięki właściwemu wsparciu i amortyzacji, wkładki pomagają zmniejszyć uczucie zmęczenia stóp, jednocześnie minimalizując ryzyko urazów związanych z niewłaściwym obciążeniem stóp. Korygują i stabilizują staw skokowy, co prowadzi do prawidłowego ustawienia i sprawnego przetaczania stopy podczas chodu. Stabilność zapewniana przez wkładki wspomaga utrzymanie równowagi ciała, co jest istotne zarówno dla codziennych czynności, jak i dla unikania potencjalnych upadków. Różne tęgłości i możliwość docinania gotowych produktów pozwalają ich dopasowanie do różnych rodzajów obuwia, co umożliwia pacjentowi zachowanie swojego stylu życia, niezależnie od preferencji obuwniczych.

Szukasz niestandardowego rozwiązania,
które **wyróżni** Twój gabinet?

Już znalazłeś! Zaprojektuj **własną wizualizację
wyściółki**, dzięki czemu reklama Twojego gabinetu
znajdzie się w bucie **każdego** z Twoich pacjentów.

Takie rozwiązanie tylko w Mazbit!



Z NAMI MOŻESZ WIĘCEJ!

ELEMENTY SYSTEMU WKŁADEK INDYWIDUALNYCH iORTO PROFESSIONAL


PODUSZKI PIANKOWE

Poduszki do formowania wkładek dostępne w trzech twardościach przeznaczonych dla osób o konkretnej masie ciała: soft (25-45 kg), medium (45-90 kg) oraz hard (90-150 kg). Wykonane są ze specjalnej pianki mającej za zadanie umożliwić właściwe odwzorowanie kształtu stopy. Jest możliwość doposażenia ich w dedykowane kliny, które w zależności od potrzeby można podkładać pod przednią, bądź tylną część poduszek w celu przeniesienia środka ciężkości Pacjenta i precyzyjniejszego uformowania wkładek w ich konkretnym obszarze. Jeżeli nie posiadają Państwo stacji diagnostycznej z wbudowanymi uchwytami, zalecamy zakup naszego podestu z poręczami. Zapewni on Pacjentowi wygodę i bezpieczeństwo w trakcie formowania.



PIECYK DO PODGRZEWANIA BAZ I ELEMENTÓW DODATKOWYCH

Piecyk o mocy 1000 W zapewnia szybki i efektywny proces wygrzewania. Pełna możliwość regulacji mocy i czasu grzania pozwala dostosować urządzenie do indywidualnych właściwości wszelakich materiałów ortopedycznych.

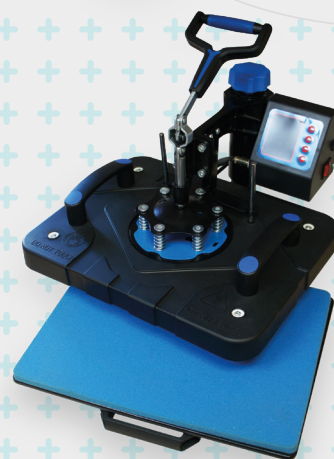


OPALARKA I NOŻYCKI

Najprostszymi i najbardziej podstawowymi narzędziami do pracy z wkładkami są opalarka oraz nożyczki. Dzięki temu duetowi jesteśmy w stanie wykonać obróbkę końcową uformowanych wkładek dostosowując odpowiednio ich kształt ostateczny oraz estetykę wykończenia.



INNE

Aby w pełni wykorzystać potencjał i możliwości systemu wkładek indywidualnych iOrto Professional, specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy całą gamę urządzeń i narzędzi opcjonalnych takich jak: szlifierka stołowa, wyciąg do szlifierki stołowej, frezarka techniczna, zestaw kapturków, frezów i nakładek, zestaw skalpeli, podkładki do obróbki materiałów, miarę do mierzenia stóp, goniometr, zwijaną miarkę stalową.

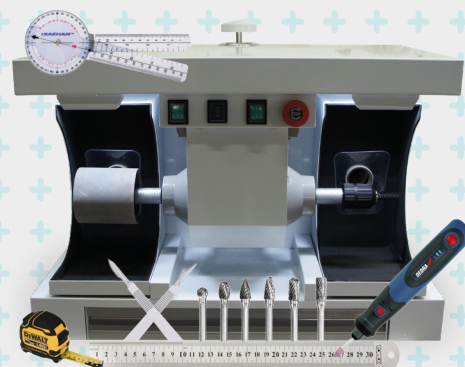

Informacje dotyczące cen oraz czasu realizacji zamówień na wyposażenie gabinetu dostępne są u menadżera linii.



iORTO PROFESSIONAL W PRAKTYCE

System poduszek piankowych został specjalnie zaprojektowany z myślą o specjalistach, którzy cenią szybkie i fachowe zaopatrzenie pacjenta. Jest odpowiedni dla każdego profesjonalisty, który chce w prosty sposób uzyskać uformowane pod stopami pacjenta wkładki od razu gotowe do użytku lub przystosowane do doklejenia elementów korekcyjnych i/lub odciążających takich jak supinatory, pronatory, kliny podwyższające, sztywniki, odciążenia punktowe, amortyzatory i wiele innych.

Specjalnie wyprofilowane poduszki zapewniają anatomiczne podparcie stopy nadając wkładkom właściwy profil. Wymuszają zgięcie grzbietowe palucha, co skłania łuk podłużny do uniesienia. Dzięki temu zabiegowi ułożone pod stopami wkładki nabierają odpowiedniego kształtu, oddziałując odciążająco lub korekcyjnie - w zależności od rodzaju zastosowanej bazy i elementów dodatkowych.

JAK POWSTAJĄ INDYWIDUALNE WKŁADKI?

Proces wykonania wkładek trwa do 15 minut. Pierwszym etapem jest wybranie 1 z 3 par dostępnych poduszek w zależności od masy ciała pacjenta. Do wyboru są wersje przeznaczone dla osób ważących **25-45 kg**, **45-90 kg** oraz **90-150 kg**. Kolejnym krokiem jest włożenie baz do piecyka na czas i do temperatury przypisanej do konkretnego modelu wkładek (patrz katalog baz). Równolegle prosimy pacjenta o staniecie boso na poduszkach w celu przećwiczenia sposobu formowania poprzez prawidłowe ułożenie stóp na poduszkach oraz zastosowania lekkiego zgięcia kolan i tzw. kolebki.



Po ustalonym czasie wygrzewania należy wyjąć bazy z piecyka i ułożyć na poduszkach. Pomocna jest podziałka liniowa naniesiona na część piętową produktu. Pomaga ona równo umieścić wkładki w miejscach, w których wcześniej dopasowywaliśmy stopy pacjenta. W razie potrzeby pomiędzy bazę, a poduszkę, można w odpowiednim miejscu włożyć pelotę metatarsalną, której kształt odwzoruje się na formowanym produkcie.

Pacjent po staniu na rozgrzanych wkładkach powinien mieć zapewnione stabilne uchwyty w celu bezpiecznego balansu ciałem. Prosimy go o delikatne zgięcie kolan i dwukrotne przeniesienie ciężaru ciała na przodostopie oraz tyłostopie (tzw. kolebkę), następnie stabilne stanie przy lekko zgiętych kolanach przez kilkadziesiąt sekund, kolejno pacjent powtarza dwukrotną kolebkę i prosimy go o zejście. Czas od momentu stanięcia na rozgrzanych bazach do momentu zejścia wynosi od **90 do 150 sek.** w zależności od modelu produktu (patrz katalog baz).



Pierwszą czynnością, jaką powinien wykonać specjalista po formowaniu jest ułożenie dwóch jeszcze ciepłych baz na równej płaskiej powierzchni na wysokości oczu i sprawdzenie łuków oraz korytka piętowego. W przypadku wystąpienia niepożądanego zrotowania części tylnej produktu, należy ją ręcznie naprostować.

Po wystygnięciu wkładek mamy trzy możliwości:

- ✓ **docinamy** (w przypadku, jeśli wystąpi taka potrzeba) i wydajemy je pacjentowi jako wyrób gotowy,
- ✓ **doklejamy** elementy korekcyjne i/lub odciążające dostępne w ofercie Mazbit, następnie **docinamy** i szlifujemy naddatki względem potrzeb i wydajemy je pacjentowi jako wyrób gotowy,
- ✓ **wycinamy** własne kształty korekt i/lub odciążeń korzystając z dostępnych w ofercie Mazbit arkuszy materiałów technicznych, doklejamy je w odpowiednie miejsca, następnie docinamy i/lub szlifujemy naddatki względem potrzeb wydajemy je pacjentowi jako wyrób gotowy.



Należy pamiętać, że wraz z gotowym produktem, pacjent otrzymać powinien informacje dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji oraz gwarancji.

Czy zrodziły się Państwu pytania?

Powyższe informacje są zaledwie wstępem do poznania rozwiązań, jakie oferuje Mazbit iORTO Professional.

Jeżeli są Państwo zainteresowani systemem, zapraszamy do kontaktu z menadżerem linii iORTO Professional. Przedstawi jej możliwości, przeszkoli z działania oraz udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania.

**Wiktor
Frąckowiak**

Technik ortopeda, Podolog
Menedżer linii

Zadzwoń 
+48 519 109 052

Napisz 
w.frackowiak@mazbit.pl



DIAGNOSTIC

Diagnostyka stóp i wad postawy - urządzenia diagnostyczne

Urządzenia diagnostyczne to podstawa każdego nowoczesnego gabinetu podologicznego, czy fizjoterapeutycznego. Nasz sprzęt opracowaliśmy w oparciu o wieloletnie doświadczenie, a także konsultacje z ortopedami, fizjoterapeutami i podologami.

Od lat tworzymy coraz to nowsze rozwiązania, by sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających. Dodatkowo na czas współpracy, udostępniamy państwu innowacyjny program diagnostyczny wraz z wsparciem IT. Dzięki takiemu kompletowi można nie tylko w profesjonalny i dokładny sposób zdiagnozować pacjenta i zarchiwizować wyniki, ale i zaprojektować idealne wkładki indywidualne dla pacjenta. Dobranie odpowiednich wkładek seryjnych, termoformowalnych o zmiennej dynamice z linii iORTO, również będzie dużo prostsze.

MEDICAL SPEED PRO 2.0

Mata tensometryczna to zaawansowane urządzenie medyczne, które w prosty, szybki i w pełni nieinwazyjny sposób pozwala ocenić kondycję stóp oraz całej postawy ciała. Dzięki precyzyjnym czujnikom nacisku rejestruje, w jaki sposób pacjent obciąża swoje stopy podczas stania, chodzenia czy biegu. Wyniki prezentowane są w formie czytelnych, kolorowych map i raportów, które łatwo zrozumieć zarówno dla specjalisty, jak i samego pacjenta.




ZALETY:

- ✓ **Dokładny pomiar rozkładu nacisku** – pozwala ocenić, które części stopy są nadmiernie obciążane.
- ✓ **Obiektywność badania** – wynik jest liczbowy i graficzny, niezależny od subiektywnej oceny badającego.
- ✓ **Wczesne wykrywanie nieprawidłowości** – umożliwia zauważenie pierwszych oznak płaskostopia, koślawości, szpotawości czy nierównomiernego obciążenia stóp.
- ✓ **Analiza statyczna i dynamiczna** – można badać zarówno postawę stojącą, jak i chód czy bieg.
- ✓ **Możliwość monitorowania postępów terapii** – porównywanie wyników w kolejnych badaniach pokazuje skuteczność rehabilitacji lub stosowanych wkładek ortopedycznych.
- ✓ **Bezbolesność i nieinwazyjność** – badanie nie powoduje żadnego dyskomfortu.
- ✓ **Szybkość i prostota wykonania** – wystarczy stanąć na macie lub przejść po niej.
- ✓ **Wszechstronność** – przydatna zarówno w ortopedii, podologii, rehabilitacji, jak i w sporcie.
- ✓ **Dokumentacja graficzna** – wyniki w formie map nacisku łatwo przedstawić pacjentowi i omówić.
- ✓ **Indywidualizacja wkładek ortopedycznych** – na podstawie wyników można zaprojektować wkładki dopasowane do stóp pacjenta.

DLACZEGO WARTO?

- ✓ **Pełna diagnostyka w kilka minut** – badanie na macie to szybki sposób na sprawdzenie, czy pacjent ma wady stóp, asymetrię obciążenia czy nieprawidłową postawę.
- ✓ **Obiektywne i precyzyjne wyniki** – mata eliminuje ryzyko błędu ludzkiego, pokazując dokładne dane liczbowe i graficzne.
- ✓ **Kompleksowa analiza** – pomiar obejmuje zarówno statykę (postawa stojąca), jak i dynamikę (chód, bieg), co daje pełny obraz biomechaniki ciała.
- ✓ **Skuteczne narzędzie terapeutyczne** – umożliwia monitorowanie postępów leczenia i rehabilitacji, a także idealne dopasowanie wkładek ortopedycznych.
- ✓ **Zwiększenie prestiżu gabinetu** – nowoczesne technologie budzą zaufanie pacjentów i podnoszą profesjonalny wizerunek placówki.
- ✓ **Wygoda i bezpieczeństwo** – badanie jest całkowicie bezbolesne, bezinwazyjne i dostępne dla osób w każdym wieku – od dzieci po seniorów.

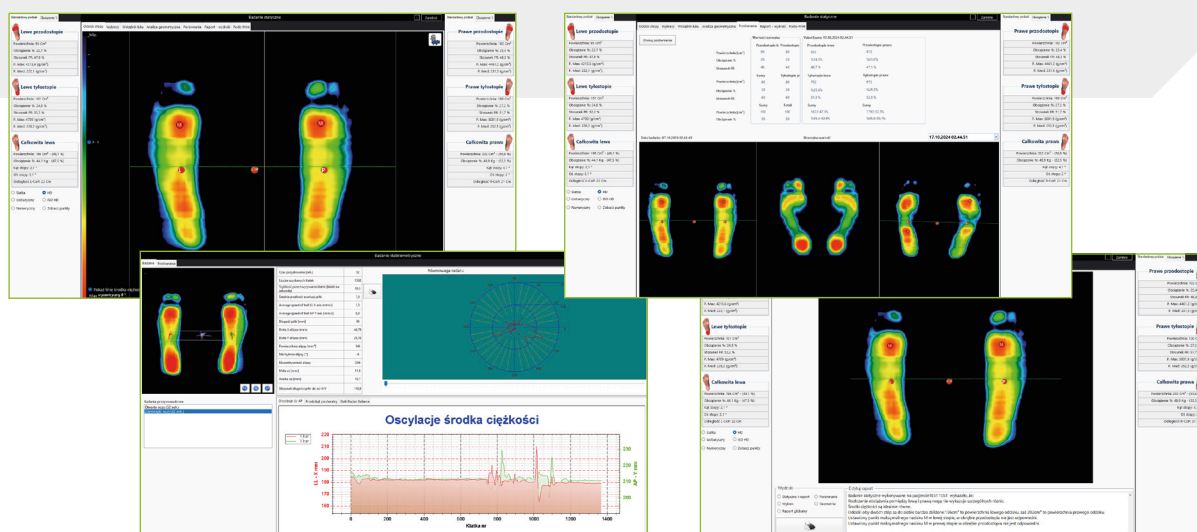

DLA KOGO?

- ✓ **Gabinetów podologicznych i ortopedycznych** – umożliwia rzetelną diagnozę i dopasowanie indywidualnych wkładek.
- ✓ **Fizjoterapeutów i rehabilitantów** – pozwala na ocenę efektów terapii i lepsze planowanie ćwiczeń.
- ✓ **Placówek sportowych** – wspiera optymalizację treningu i profilaktykę urazów u zawodników.
- ✓ **Sklepów z wkładkami ortopedycznymi** – stanowi doskonałe narzędzie sprzedażowe, które pokazuje pacjentowi, dlaczego warto zainwestować w odpowiednie wkładki.

DANE TECHNICZNE

- najdokładniejsze urządzenie diagnostyczne do oceny wad stóp oraz wad postawy,
- czujnik rezystancyjny: 16 czujników x cm²,
- częstotliwość odświeżania: 5/600 Hz do wyboru,
- obszar badania: 40 x 40 cm,
- wymiary: 55 x 40 cm
- waga: 4 kg,
- max obciążenie: 200 kg,
- zasilanie: 15 VCC.



PODOSCOPE 4K DUO - PLATFORM

to nowoczesna stacja diagnostyczna do badania stóp i wstępnej oceny postawy, łącząca znane z podoskopu rozwiązanie optyczne z cyfrową rejestracją obrazu i funkcjonalnym oprogramowaniem. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o gabinetach podologicznych, ortopedycznych, fizjoterapeutycznych oraz pracowniach produkujących wkładki ortopedyczne – tam, gdzie wymagane są szybkie, powtarzalne i dokumentowalne badania statyczne i posturalne.

ZALETY:

✓ Dwie kamery 4K

- Pozwalają na wykonanie zdjęć zarówno podeszwowej strony stóp, jak i ustawienia kończyn dolnych na poziomie kostek i kolan.
- Wysoka rozdzielczość obrazu zapewnia bardzo dobrą widoczność detali.

✓ Specjalistyczne oprogramowanie do archiwizacji badań

- Możliwość zapisu wyników (zdjęć/obrazów) i danych diagnostycznych.
- Ułatwia porównywanie zmian w czasie, dokumentację dla pacjenta, planowanie terapii czy dobór wkładek.

✓ Nośność do 150 kg

- Urządzenie wykonane z wytrzymałych materiałów, co pozwala na badanie pacjentów o dużej masie ciała bez ryzyka uszkodzenia platformy.

✓ Stabilne ustawienie i poziomowanie

- Wbudowane stopki, które pomagają wypoziomować stację – co poprawia dokładność pomiaru.

✓ Możliwość demontażu kolumny sterującej

- Kolumna z panelem sterującym jest demontowalna, co ułatwia transport urządzenia – przydatne, gdy diagnozy robisz również w terenie lub w różnych placówkach.

✓ Zmienna kolorystyka podświetlenia LED

- Możliwość regulacji oświetlenia obszaru diagnostycznego, co może pomagać w lepszym uwidocznieniu różnych struktur stopy lub wyróżnieniu kontrastów.
- Podświetlenie obudowy LED – estetyka, a także funkcjonalność (np. lepsza widoczność).

✓ Personalizacja i branding

- Możliwość umieszczenia własnego logo na kolumnie stacji diagnostycznej.

✓ Interfejs i łączność

- Port USB do połączenia stacji z komputerem, panel sterujący oświetleniem LED.
- "Kokpit na komputer" – prawdopodobnie wygodna baza / miejsce, gdzie komputer/monitor można umieścić, co poprawia ergonomię pracy.

✓ Wsparcie IT od producenta

- Producent zapewnia wsparcie działu IT na cały okres współpracy, co jest bardzo pomocne w konfiguracji, aktualizacjach, ewentualnych problemach z oprogramowaniem.


✓ Gabaryty i mobilność

- Wymiary stosunkowo kompaktowe jak na stację diagnostyczną: 42,5 × 72,5 × 119,5 cm.
- Umożliwia łatwe ustawienie w gabinecie bez zajmowania przesadnie dużo miejsca.
- Demontowalna kolumna ułatwia transport i przechowywanie.



KORZYŚCI KLINICZNE I UŻYTKOWE


- ✓ **Obiektywna dokumentacja** - zdjęcia zapisane cyfrowo ułatwiają monitorowanie zmian (postęp terapii, efekty wkładek).
- ✓ **Lepsza komunikacja z pacjentem** - podświetlone, wysokiej jakości zdjęcia ułatwiają pokazanie i wytłumaczenie problemów.
- ✓ **Wsparcie dla produkcji wkładek** - zarchiwizowane obrazy i dane ułatwiają przekazanie informacji do pracowni protetycznej.
- ✓ **Mobilność i elastyczność** - możliwość demontażu kolumny sprawia, że stację łatwiej przewozić na wizyty w terenie.

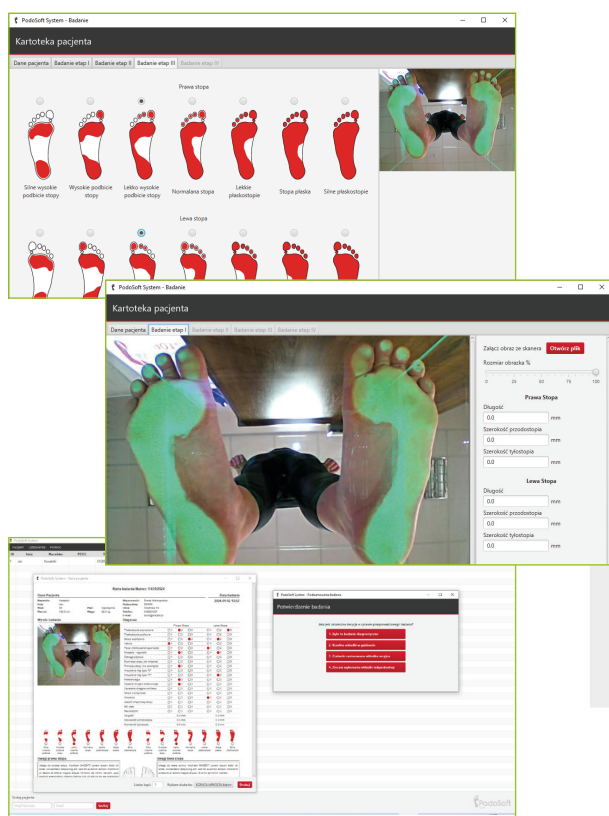

raport PDF



baza pacjentów

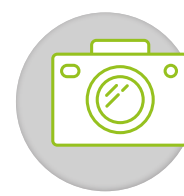


eksport zdjęć

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- ✓ badania statyczne stóp i ocena rozmieszczenia obciążeń,
- ✓ wstępna diagnostyka przy doborze wkładek ortopedycznych,
- ✓ diagnostyka podologiczna i pierwsza faza oceny wad postawy,
- ✓ archiwizacja wyników badań dla celów kontroli i badań porównawczych.

DANE TECHNICZNE

- dwie kamery 4K do diagnostyki,
- oprogramowanie do archiwizacji przeprowadzonego badania postawy,
- zmienna kolorystyka podświetlenia LED obszaru diagnostycznego,
- podświetlenie LED obudowy,
- miejsce na Twoje LOGO,
- port USB do połączenia stacji z komputerem,
- kokpit na komputer,
- panel sterujący oświetleniem LED,
- kolumna z możliwością demontażu do transportu,
- udźwig: do 150kg,
- wymiary: 42,5 x 72,5 x 119,5 cm.

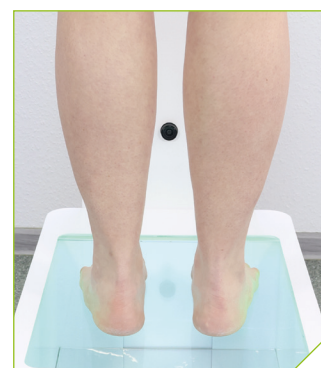


*Parametry urządzeń mogą się różnić w zależności od dostępności komponentów.

PODOSCOPE 4K

podoskop z oprogramowaniem do archiwizacji badań diagnostycznych


Zalety:

Urządzenie jest małe i lekkie, idealne do małych sklepów medycznych nastawionych na odsprzedaż wkładek profilaktycznych i seryjnych z linii iORTO. Ze względu na swoją wagę, może również służyć do przeprowadzania diagnostyki w terenie. Dodatkowo oferujemy bezpłatnie na czas trwania współpracy innowacyjne, specjalistyczne oprogramowanie ze wsparciem działu IT, umożliwiające projektowanie wkładek indywidualnych oraz archiwizowanie badań. Urządzenie ma wbudowaną kamerę do wykonywania zdjęć w bardzo dobrej jakości.

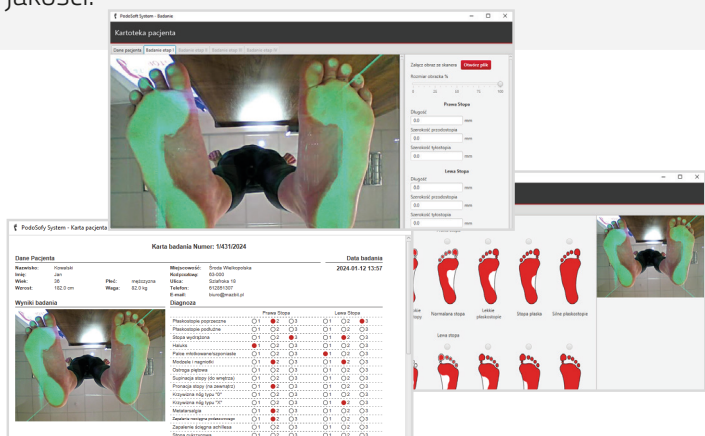

Dane techniczne:

- ✓ kamera 4K,
- ✓ podświetlenie diodami LED,
- ✓ zmienna kolorystyka podświetlenia,
- ✓ wymiary: 48,5 x 40 x 22,5 cm,
- ✓ waga: 13,75 kg.

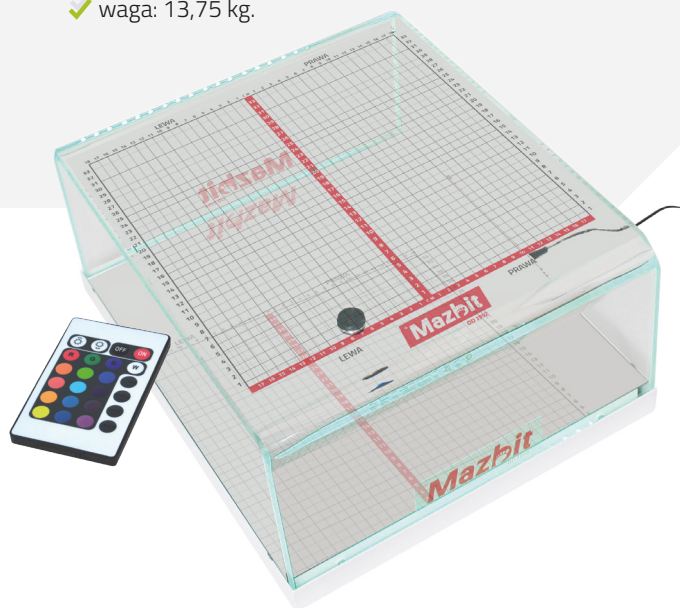


PODOSCOPE

podoskop z elektroniczną kartą diagnostyczną


Zalety:

Urządzenie jest małe i lekkie, idealne do małych sklepów medycznych nastawionych na odsprzedaż wkładek profilaktycznych i seryjnych z linii iORTO. Ze względu na swoją wagę, może również służyć do przeprowadzania diagnostyki w terenie. Dodatkowo oferujemy bezpłatnie elektroniczną kartę diagnostyczną, co ułatwi ocenę stanu stóp pacjenta.

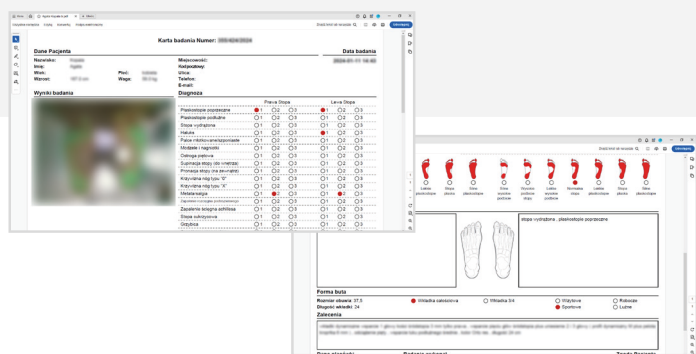

Dane techniczne:

- ✓ podświetlenie diodami LED,
- ✓ zmienna kolorystyka podświetlenia,
- ✓ wymiary: 48,5 x 40 x 16,5 cm,
- ✓ waga: 12,75 kg.

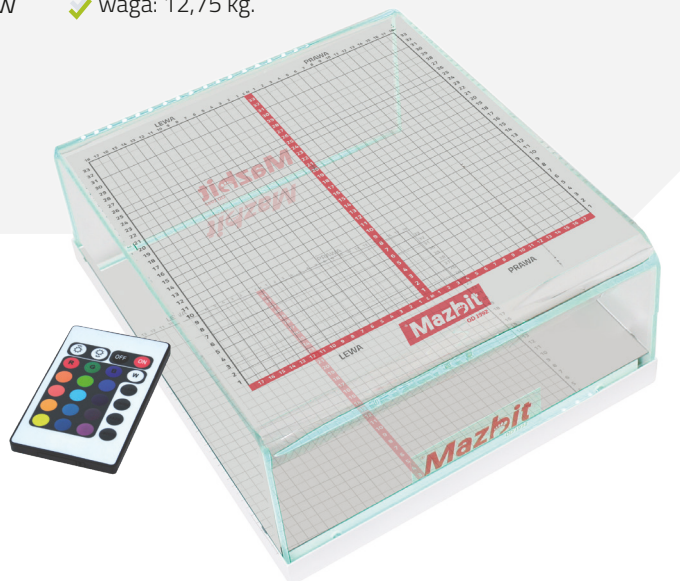

BODY POSTURAL SYSTEM MANUAL 2.0

NOWOŚĆ!

system badania postawy z oprogramowaniem rozszerzonym do archiwizacji badań diagnostycznych

Zalety:

System umożliwia przeprowadzenie analizy posturalnej ciała w celu wizualnej oceny i numerycznej oceny ewentualnych asymetrii pacjenta. Pobieranie obrazu odbywa się w procesie cyfrowym za pomocą dedykowanej kamery na statywie, które jest elektronicznie regulowane w zależności od wzrostu pacjenta, na którym umieszczane są określone znaczniki.

Body Postural System jest wyposażony w oprogramowanie do przeglądania obrazu z rekonstrukcją 3D łopatek, miednicy i kręgosłupa. Umożliwia zaczytanie zdjęć rentgenowskich z możliwością porównania z danymi pacjenta.

Body Postural System jest w stanie automatycznie mierzyć długość kończyn dolnych i górnych oraz wykonywać automatycznie obliczenia, które zazwyczaj wykonuje się ręcznie, takie jak np. kąt Cobba.

Body Postural System jest narzędziem kompletnym, pozwalającym na monitorowanie stanu pacjenta w czasie (porównaniu aktualnych oraz archiwalnych wyników badań).

Dane techniczne:

- ✓ podstawa: statyw,
- ✓ zasilanie: 5 VCC (USB),
- ✓ pobór prądu (mA): 15,
- ✓ rozdzielczość: 1920 x 1080,
- ✓ materiał: aluminium, tworzywo w kolorze aluminium,
- ✓ typ interfejsu: USB 2.0,
- ✓ minimalna wysokość mm: 630,
- ✓ maksymalna wysokość mm: 930,
- ✓ szerokość podstawy mm: 300,
- ✓ głębokość podstawy mm: 300,
- ✓ kalibrowanie: przez oprogramowanie,
- ✓ temperatura pracy: 0°C – 55°C,
- ✓ certyfikacja produktu: CE.



*Parametry urządzeń mogą się różnić w zależności od dostępności komponentów.



CITY SLIM

PODLINIA: **ACTIVE**

Temperatura wyrzewnania 	Czas wyrzewnania 	Czas formowania
100°C	240 sek.	90 sek.

CHARAKTERYSTYKA:

Szczególną grupą odbiorców dynamicznych wkładek CITY SLIM są aktywne kobiety, które na co dzień korzystają z obuwia eleganckiego i dopasowanego. Pomimo wyjątkowo cienkiej konstrukcji zapewniają odpowiednie podparcie łuków stopy oraz doskonałą amortyzację i stabilizację. Produkt gwarantuje niezrównany komfort i przeciwdziała nadmiernemu zmęczeniu stóp.

ZASTOSOWANIE:



ROZMIARY:

35/36 37/38

39/40 41/42

43/44

Wkładki dostępne w tęgości:



ELEMENTY SKŁADOWE:



- 1 Lining****
wyściółka z mikrofibry
- 2 EVA Perfor 2 mm**
35 ShA 0,14 g/cm³
wyściółka antyalergiczna
- 3 Hydrogum 0,6 mm**
higroskopijność
- 4 Poron 3 mm**
8 ShA 0,24 g/cm³
absorpcja wstrząsów
- 5 Support Z 1,2mm**
stabilizacja i wzmocnienie bazy
- 6 Support M 1,2 mm**
stabilizacja i podparcie
- 7 Anthracover 0,6 mm**
pokrycie spodnie



*Czas wygrzewania uzależniony jest od grubości oraz rodzaju zastosowanych materiałów w danym modelu baz wkładek. Im cieńszy materiał, tym należy zastosować niższą temperaturę lub krótszy czas wygrzewania.

**Lining nie wchodzi w skład podstawowej wersji bazy i jest dostępny jako opcja dodatkowa.



CITY

PODLINIA: **ACTIVE**

Temperatura wygrzewania

100°C

Czas wygrzewania

240 sek.

Czas formowania

90 sek.

CHARAKTERYSTYKA:

Dynamiczne wkładki CITY znajdują zastosowanie w obuwiu każdego aktywnego człowieka, dla którego codziennością jest przemieszczanie się pieszo. Pomimo wyjątkowo cienkiej konstrukcji zapewniają odpowiednie podparcie łuków stopy oraz doskonałą amortyzację i stabilizację. Produkt gwarantuje niezrównany komfort i przeciwdziała nadmiernemu zmęczeniu stóp.

ZASTOSOWANIE:

bóle pięt

płaskostopie podłużne

płaskostopie poprzeczne

ROZMIARY:


35/36 37/38

39/40 41/42

43/44 45/46

47/48

Wkładki dostępne w tęgłości:

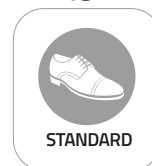

ELEMENTY SKŁADOWE:



- Lining****
wyściółka z mikrofibry
- EVA Perfor 2 mm**
35 ShA 0,14 g/cm³
wyściółka antyalergiczna
- Hydrogum 0,6 mm**
higroskopijność
- Poron 3 mm**
8 ShA 0,24 g/cm³
absorpcja wstrząsów
- Support Z 1,2mm**
stabilizacja i wzmocnienie bazy
- Support M 1,2 mm**
stabilizacja i podparcie
- Anthracovert 0,6 mm**
pokrycie spodnie



*Czas wygrzewania uzależniony jest od grubości oraz rodzaju zastosowanych materiałów w danym modelu baz wkładek. Im cieńszy materiał, tym należy zastosować niższą temperaturę lub krótszy czas wygrzewania.

**Lining nie wchodzi w skład podstawowej wersji bazy i jest dostępny jako opcja dodatkowa.



HARD WORK

PODLINIA: **ACTIVE**

Temperatura wygrzewania

100°C

Czas wygrzewania

300 sek.

Czas formowania

120 sek.

CHARAKTERYSTYKA:

Dynamiczne wkładki HARD WORK dedykowane są osobom, których aktywność zawodowa powoduje duże obciążenie stóp. Długotrwała praca stojąca lub chodząca predysponuje liczne przeciążenia, które odzwierciedlają się w narastających zgrubieniach skórnych, bólu i zmęczeniu stóp. Wkładki Hard Work zostały zaprojektowane tak aby skutecznie odciążać piętę i przodostopie, a dzięki dynamicznemu rdzeniowi utrzymać stopę w dobrej kondycji i pełnej funkcjonalności.

ZASTOSOWANIE:

ostroga piętowa

bóle pięt

zapalenie ścięgna Achillesa

bóle układu ruchu (np. stawów kolanowych)

ROZMIARY:

35/36

37/38

39/40

41/42

43/44

45/46

47/48

Wkładki dostępne w tęgościach:

STANDARD

SPACE

ELEMENTY SKŁADOWE:



- Lining****
wyściółka z mikrofibry
- EVA Perfor 2 mm**
35 ShA 0,14 g/cm³
wyściółka antyalergiczna
- EVA Blue 3 mm**
30 ShA 0,23 g/cm³
odciążenie, amortyzacja
- EVA Orange 3 mm**
16 ShA 0,18 g/cm³
amortyzacja pięty
- EVA Yellow 2 mm**
30 ShA 0,18 g/cm³
amortyzacja tyłostopia
- EVA Red 2 mm**
25 ShA 0,16 g/cm³
amortyzacja pięty
- Support M 1,2 mm**
podparcie
- Support V 1,2 mm**
stabilizacja tyłostopia
- Anthracover 0,6 mm**
pokrycie spodnie



*Czas wygrzewania uzależniony jest od grubości oraz rodzaju zastosowanych materiałów w danym modelu baz wkładek. Im cieńszy materiał, tym należy zastosować niższą temperaturę lub krótszy czas wygrzewania.

**Lining nie wchodzi w skład podstawowej wersji bazy i jest dostępny jako opcja dodatkowa.



RUN

PODLINIA: **SPORT**

Temperatura wygrzewania

100°C

Czas wygrzewania

240 sek.

Czas formowania

90 sek.

CHARAKTERYSTYKA:

Dynamiczne wkładki RUN wyróżniają się lekką i dynamiczną konstrukcją dedykowaną w sam raz do biegania. Ich cienka budowa sprawia, że na wysokość nie zabierają zbyt dużo miejsca w obuwiu, a jednocześnie odciążają cały aparat ruchu oraz przyczyniają się do poprawy wyników biegacza. Zaleca się dostosowanie nożyczkami tęgości przedniej części uformowanych wkładek w celu idealnego dopasowania do obuwia.

ROZMIARY:

37/38 39/40

41/42 43/44

45/46 47/48


Wkładki dostępne w tęgości:



ZASTOSOWANIE:



DEDYKOWANA AKTYWNOŚĆ:

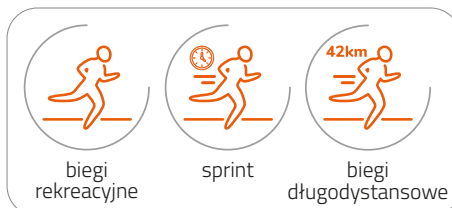

ELEMENTY SKŁADOWE:



- Lining****
wyściółka z mikrofibry
- EVA Perfor 2 mm**
35 ShA 0,14 g/cm³
cienka wyściółka antyalergiczna
- EVA Red Metatarsal 2 mm**
25 ShA 0,16 g/cm³
odciążenie i amortyzacja przodstopia
- Microgum OM 2 mm**
10 ShA 0,12 g/cm³
absorbpcja wstrząsów
- Microgum OS 2 mm**
10 ShA 0,12 g/cm³
absorbpcja wstrząsów
- Support MS 1,2 mm**
podparcie śródstopia
- Support VS 1,2 mm**
stabilizacja tyłostopia i śródstopia
- Anthracover 0,6 mm**
pokrycie spodnie



*Czas wygrzewania uzależniony jest od grubości oraz rodzaju zastosowanych materiałów w danym modelu baz wkładek. Im cieńszy materiał, tym należy zastosować niższą temperaturę lub krótszy czas wygrzewania.

**Lining nie wchodzi w skład podstawowej wersji bazy i jest dostępny jako opcja dodatkowa.



MULTISPORT

PODLINIA: **SPORT**

Temperatura wygrzewania

100°C

Czas wygrzewania

240 sek.


Czas formowania

90 sek.


CHARAKTERYSTYKA:

Dynamiczne wkładki MULTISPORT to produkt przygotowany specjalnie dla wszystkich osób uprawiających aktywności sportowe, w których mamy do czynienia z dużą dynamiką ruchu. Znajdzie zastosowanie w obuwiu amatorskim oraz profesjonalnym. Dzięki zastosowaniu dodatkowej cienkiej termoformowalnej płyty żywicznej na całej długości wkładek, użytkownik uzyskuje precyzyjne podparcie idealnie dopasowane do swoich stóp.

ZASTOSOWANIE:

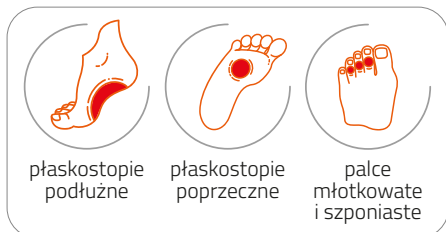


DEDYKOWANA AKTYWNOŚĆ:

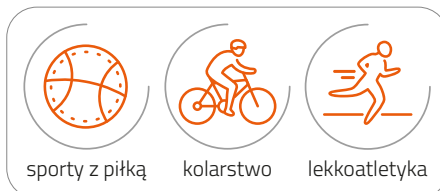

ROZMIARY:

35/36	37/38
39/40	41/42
43/44	45/46
47/48	

Wkładki dostępne w tęgosci:

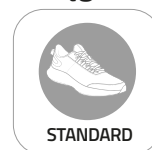

ELEMENTY SKŁADOWE:



- Lining****
wyściółka z mikrofibry
- EVA Perfor 2 mm**
35 ShA 0,14 g/cm³
wyściółka antyalergiczna
- Microgum 2 mm**
10 ShA 0,12 g/cm³
absorbpcja wstrząsów
- Support G 1,2 mm**
stabilizacja i wzmocnienie bazy
- Support V 1,2 mm**
stabilizacja tyłostopia
- Anthracovert 0,6 mm**
pokrycie spodnie



*Czas wygrzewania uzależniony jest od grubości oraz rodzaju zastosowanych materiałów w danym modelu baz wkładek. Im cieńszy materiał, tym należy zastosować niższą temperaturę lub krótszy czas wygrzewania.

**Lining nie wchodzi w skład podstawowej wersji bazy i jest dostępny jako opcja dodatkowa.



BOOTSPOORT

PODLINIA: **SPORT**

Temperatura wygrzewania

100°C

Czas wygrzewania

300 sek.

Czas formowania

150 sek.

CHARAKTERYSTYKA:

Dynamiczne wkładki BOOTSPOORT powstały z myślą o fanach łyżwiarstwa, narciarstwa, snowboardingu oraz jazdy na rolkach. Do produkcji wyrobu użyto wielowarstwowej pianki amortyzującej, która dodaje użytkownikowi komfortu i zmniejsza zmęczenie stóp. Dzięki innowacyjnemu modułowi stabilizującemu wkładki zapewniają odpowiednią stabilizację i doskonałe czucie podłoża.

ROZMIARY:

35/36	37/38
39/40	41/42
43/44	45/46
47/48	

ZASTOSOWANIE:

stopy z ranami

stopa cukrzycowa - diabetycy

przeciążenia aparatu mięśniowo-więzadłowego

modzele i odciski

stopy wrażliwe

DEDYKOWANA AKTYWNOŚĆ:

narciarstwo

snowboarding

wrotkarstwo

Wkładki dostępne w tęgościach:

STANDARD

SPACE

ELEMENTY SKŁADOWE:



- Lining****
wyściółka z mikrofibry
- EVA Perfor 2 mm**
35 ShA 0,14 g/cm³
wyściółka antyalergiczna
- EVA Orange 3 mm**
16 ShA 0,18 g/cm³
odciążenie, komfort
- EVA Red 2 mm**
25 ShA 0,16 g/cm³
amortyzacja, stabilizacja
- Support M 1,2 mm**
podparcie
- Support V 1,2 mm**
stabilizacja tyłostopia
- Anthracovert 0,6 mm**
pokrycie spodnie



*Czas wygrzewania uzależniony jest od grubości oraz rodzaju zastosowanych materiałów w danym modelu baz wkładek. Im cieńszy materiał, tym należy zastosować niższą temperaturę lub krótszy czas wygrzewania.

**Lining nie wchodzi w skład podstawowej wersji bazy i jest dostępny jako opcja dodatkowa.



SUPPORT


PODLINIA: MEDIC

Temperatura wyrzewnania	Czas wyrzewnania	Czas formowania
100°C	240 sek.	90 sek.

CHARAKTERYSTYKA:

Dynamiczne wkładki SUPPORT powstały z myślą o osobach, które zmagają się z płaskostopiem podłużnym i poprzecznym. Model ten ze względu na swoją tęgosc pasuje do większości rodzajów obuwia. Doskonale współpracuje z dodatkowymi korektami, które mogą zostać zamontowane po uformowaniu.

ZASTOSOWANIE:

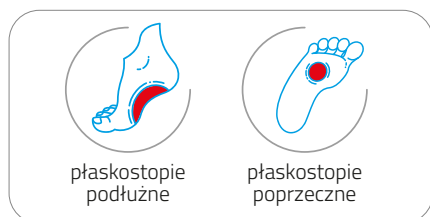

ROZMIARY:


35/36 37/38

39/40 41/42

43/44 45/46

47/48

Wkładki dostępne
w tęgoscach:

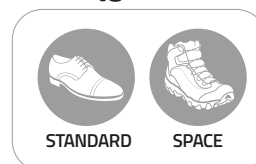

ELEMENTY SKŁADOWE:



- Lining****
wyściółka z mikrofibry
- EVA Perfor 2 mm**
35 ShA 0,14 g/cm³
wyściółka antyalergiczna
- EVA Moro 2 mm**
30 ShA 0,18 g/cm³
Miękkosc i podparcie
- Support M 1,2 mm**
podparcie i korekcja
- Support V 1,2 mm**
stabilizacja tyłostopia i
śródstopia
- Anthracovert 0,6 mm**
pokrycie spodnie



*Czas wyrzewnania uzalezniony jest od grubosci oraz rodzaju zastosowanych materialow w danym modelu baz wkładek.
Im cieńszy material, tym należy zastosować niższą temperaturę lub krótszy czas wyrzewnania.

**Lining nie wchodzi w skład podstawowej wersji bazy i jest dostępny jako opcja dodatkowa.



TOTAL SUPPORT

PODLINIA: MEDIC

Temperatura wygrzewania

100°C

Czas wygrzewania

240 sek.

Czas formowania

90 sek.

CHARAKTERYSTYKA:

Dynamiczne wkładki TOTAL SUPPORT zalecane są pacjentom ze schorzeniami przede wszystkim w obrębie śródstopia, przodostopia i palców. Dzięki użyciu w procesie produkcji żywicznej płytki usztywniającej na całej długości produktu, możliwe jest nadanie odpowiedniej sztywności i kształtu w obszarze występowania schorzeń. Dzięki kompatybilności z dodatkowymi elementami korekcyjnymi produkt staje się niezwykle uniwersalny w zastosowaniu jednocześnie skutecznie oddziałując na ciało pacjenta.

ZASTOSOWANIE:

płaskostopie podłużne

płaskostopie poprzeczne

palce młotkowate i szponiaste

ROZMIARY:

35/36

37/38

39/40

41/42

43/44

45/46

47/48

Wkładki dostępne w tęgościach:

STANDARD

SPACE

ELEMENTY SKŁADOWE:



- Lining****
wyściółka z mikrofibry
- EVA Perfor 2 mm**
35 ShA 0,14 g/cm³
cienka wyściółka antyalergiczna
- Microgum 2 mm**
10 ShA 0,12 g/cm³
absorbpcja wstrząsów
- Support G 1,2 mm**
stabilizacja i korekcja
- Support V 1,2 mm**
stabilizacja tyłostopia i śródstopia
- Anthracovert 0,6 mm**
pokrycie spodnie



*Czas wygrzewania uzależniony jest od grubości oraz rodzaju zastosowanych materiałów w danym modelu baz wkładek. Im cieńszy materiał, tym należy zastosować niższą temperaturę lub krótszy czas wygrzewania.

**Lining nie wchodzi w skład podstawowej wersji bazy i jest dostępny jako opcja dodatkowa.



HEEL SUPPORT


PODLINIA: MEDIC

Temperatura wygrzewania	Czas wygrzewania	Czas formowania
100°C	300 sek.	120 sek.

CHARAKTERYSTYKA:

Szczególną grupą odbiorców, dla której stworzone zostały dynamiczne wkładki HEEL SUPPORT, są pacjenci z bólem kolan, pięt lub ostrogą piętową. Po uformowaniu działają kojąco na bolesne obszary tyłostopia. Zalecane także przy bólach stawowych kończyny dolnej, bioder, pleców, a nawet szyi. W przypadku pacjentów z dodatkowymi wadami zaleca się zainstalowanie elementów korekcyjnych.


ZASTOSOWANIE:

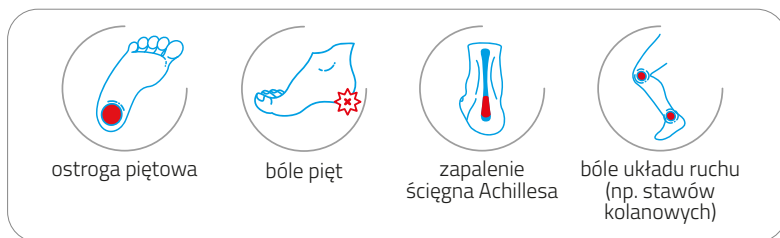

ROZMIARY:

35/36	37/38
39/40	41/42
43/44	45/46
47/48	

Wkładki dostępne w tęgościach:

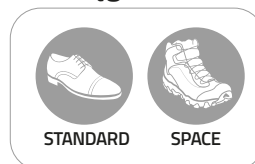

ELEMENTY SKŁADOWE:



- Lining****
wyściółka z mikrofibry
- EVA Perfor 2 mm**
35 ShA 0,14 g/cm³
wyściółka antyalergiczna
- EVA Blue 3 mm**
30 ShA 0,23 g/cm³
odciążenie, amortyzacja
- EVA Orange 3 mm**
16 ShA 0,18 g/cm³
amortyzacja pięt
- EVA Yellow 2 mm**
30 ShA 0,18 g/cm³
amortyzacja tyłostopia
- EVA Red 2 mm**
25 ShA 0,16 g/cm³
amortyzacja pięt
- Support M 1,2 mm**
podparcie i korekcja
- Support V 1,2 mm**
stabilizacja tyłostopia i śródstopia
- Anthracovert 0,6 mm**
pokrycie spodnie



*Czas wygrzewania uzależniony jest od grubości oraz rodzaju zastosowanych materiałów w danym modelu baz wkładek. Im cieńszy materiał, tym należy zastosować niższą temperaturę lub krótszy czas wygrzewania.

**Lining nie wchodzi w skład podstawowej wersji bazy i jest dostępny jako opcja dodatkowa.



SOFT

PODLINIA: MEDIC

Temperatura wygrzewania

100°C

Czas wygrzewania

300 sek.

Czas formowania

150 sek.

CHARAKTERYSTYKA:

Dynamiczne wkładki SOFT polecane są przede wszystkim osobom ze stopami wrażliwymi, bolącymi, zmęczonymi lub ze skłonnością do powstawania ran. Ich pogrubiona konstrukcja zapewnia niezwykle wysoki stopień amortyzacji, co skutkuje uczuciem komfortu i miękkości. Ze względu na większą grubość produktu, należy zwrócić uwagę na wydłużony czas rozgrzewania i formowania baz. Obutwie, w którym zaleca się używanie produktu, również powinno posiadać nieco większą przestrzeń na wysokość. Pacjentom, którzy wymagają dodatkowego podparcia kierunkowego, zaleca się zainstalowanie dodatkowych elementów korekcyjnych.

ZASTOSOWANIE:

stopy z ranami

stopa cukrzycowa - diabetycy

przeciążenia aparatu mięśniowo-więzadłowego

modzele i odciski

stopy wrażliwe

ROZMIARY:

35/36 37/38

39/40 41/42

43/44 45/46

47/48

Wkładki dostępne w tęgosciach:

STANDARD

SPACE

ELEMENTY SKŁADOWE:



- Lining****
wyściółka z mikrofibry
- EVA Perfor 2 mm**
35 ShA 0,14 g/cm3
wyściółka antyalergiczna
- EVA Orange 3 mm**
16 ShA 0,18 g/cm3
odciążenie, komfort
- EVA Red 2 mm**
25 ShA 0,16 g/cm3
amortyzacja, stabilizacja
- Support M 1,2 mm**
podparcie i korekcja
- Support V 1,2 mm**
stabilizacja tyłostopia i śródstopia
- Anthracover 0,6 mm**
pokrycie spodnie



*Czas wygrzewania uzależniony jest od grubości oraz rodzaju zastosowanych materiałów w danym modelu baz wkładek. Im cieńszy materiał, tym należy zastosować niższą temperaturę lub krótszy czas wygrzewania.

**Lining nie wchodzi w skład podstawowej wersji bazy i jest dostępny jako opcja dodatkowa.



KID


PODLINIA: MEDIC

Temperatura wygrzewania	Czas wygrzewania	Czas formowania
100°C	240 sek.	90 sek.

CHARAKTERYSTYKA:

Dynamiczne wkładki KID to produkt przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym zmagających się z płaskostopiem podłużnym, poprzecznym, koślawością lub szpotawością. Ich specjalnie opracowana konstrukcja wspomaga uformowanie wysokiego korytka piętowego oraz jest w pełni dostosowana do montażu zindywidualizowanych elementów korekcyjnych.

ZASTOSOWANIE:

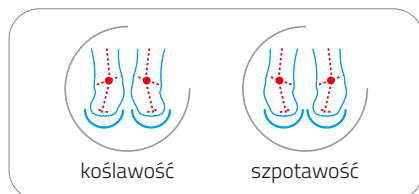

ROZMIARY:

31/32 33/34

35/36

Wkładki dostępne
w tęgościach:



ELEMENTY SKŁADOWE:



- Lining****
wyściółka z mikrofibry
- EVA Perfor 2 mm**
35 ShA 0,14 g/cm³
cienka wyściółka antyalergiczna
- EVA Moro 2 mm**
30 ShA 0,23 g/cm³
miękość i podparcie
- Support Kid M 1 mm**
podparcie i korekcja
- Support Kid S 1 mm**
stabilizacja tyłostopia
- Anthracover 0,6 mm**
pokrycie spodnie



*Czas wygrzewania uzależniony jest od grubości oraz rodzaju zastosowanych materiałów w danym modelu baz wkładek. Im cieńszy materiał, tym należy zastosować niższą temperaturę lub krótszy czas wygrzewania.

**Lining nie wchodzi w skład podstawowej wersji bazy i jest dostępny jako opcja dodatkowa.



POZABIEGOWA

POZ-001

PODLINIA: MEDIC

ROZMIARY:

Wkładki dostępne
w tęgości:

37/38

39/40

41/42

43/44

45/46

47/48



NH-SPACE

CHARAKTERYSTYKA:

POZ-001 to całkiem nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się jako uzupełnienie terapii pomiędzy wizytami kontrolnymi. Wykonanie wkładki nie wymaga specjalistycznego sprzętu co umożliwia szybkie wykonanie odciążenia podczas jednej wizyty w gabinecie podologicznym.

Wkładka POZ-001 daje nieograniczone możliwości modyfikacji pod kątem dopasowania rodzaju materiału odciążającego a co za tym idzie zyskujemy pełną dowolność dopasowania jej do aktualnych potrzeb naszego pacjenta.

Rodzaj zastosowanych materiałów pozwala na wykonanie w nich wszelkiego rodzaju zagłębień, otworów w celu odciążenia wybranego miejsca na stopie bez obawy o utratę kluczowych właściwości wkładki.


ZASTOSOWANIE:

- ✓ wsparcie podczas leczenia ran w obrębie stopy,
- ✓ redukcja nacisku,
- ✓ odciążenie miejsc objętych owrzodzeniem w przebiegu Zespołu Stopy cukrzycowej,
- ✓ wspomaganie w terapii modzeli, odcisków, brodawek wirusowych,
- ✓ odciążenie stóp po zabiegach operacyjnych w przebiegu: Hallux Valgus, Hallux Ridigus, choroby Ledderhose'a itp.,
- ✓ uzupełnienie w terapii hiperkeratoz, pękających pięt,
- ✓ odciążenie w terapii Rogowca, zapalenia trzyczeczek, neuralgii Mortona,
- ✓ uzupełnienie w terapii zmian przeciążeniowych.

ZALETY:

- ✓ Do wykonania wkładki nie potrzeba specjalistycznego sprzętu.
- ✓ Materiały odciążające można łączyć ze sobą bądź stosować oddzielnie wg uznania oraz wycinać/frezować odciążenia do aktualnych potrzeb pacjenta.
- ✓ Zastosowanie bazy SUPPORT gwarantuje dopasowanie wkładki do obuwia oraz zapobiega jej przesuwaniu się.
- ✓ Wszystkie materiały pokryte są taśmą klejącą co umożliwia szybkie połączenie ich ze sobą.
- ✓ Wysokiej jakości materiały gwarantuje wytrzymałość wkładki podczas całego procesu terapii.
- ✓ Możliwość stosowania warstwy EVA PERFOR jako wierzchniej jak również możliwość naniesienia na nią wyściółki z własnym logo.
- ✓ Warstwa wierzchnia może być pokryta nanocząsteczkami srebra.


ELEMENTY SKŁADOWE:

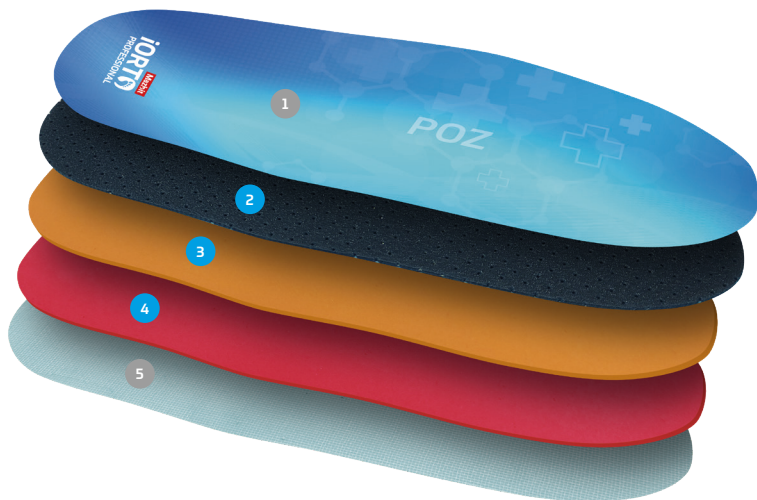

- 1 Lining**
wyściółka z mikrofibry
- 2 EVA Perfor**
35 ShA 0,14 g/cm³
cienka, antyalergiczna
- 3 EVA Orange**
16 ShA 0,18 g/cm³
odciążenie, amortyzacja
- 4 Poron**
8 ShA 0,24 g/cm³
amortyzacja, tłumienie wstrząsów
- 5 Support G 1,2mm**
stabilizacja




ELEMENTY KORYGUJĄCE - pianka EVA, PORON, płyta żywiczna

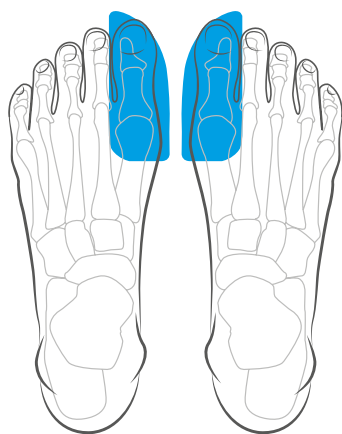


Wsparcie głowy
I kości śródstopia i palucha

Symbol	Materiał	Wysokość	Długość/szerokość [mm]		
			105 x 35 mm	116 x 40 mm	134 x 43 mm
Z2EVA-2	EVA	2 mm	1 35/36-41/42	2 43/44-45/46	3 47/48
Z2EVA-3	EVA	3 mm			
Z2PRN-3	Poron	3 mm			

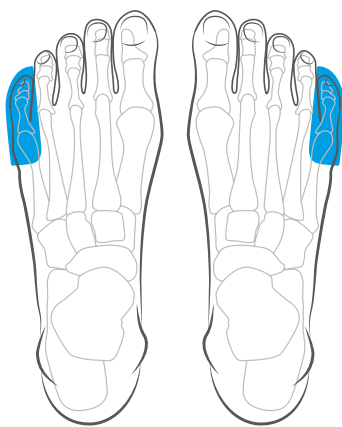


Wsparcie głowy
V kości śródstopia i palca V

Symbol	Materiał	Wysokość	Długość/szerokość [mm]		
			87 x 23 mm	93 x 25 mm	104 x 30 mm
Z4EVA-2	EVA	2 mm	1 35/36-37/38	2 39/40-41/42	3 43/44-47/48
Z4EVA-3	EVA	3 mm			
Z4PRN-3	Poron	3 mm			

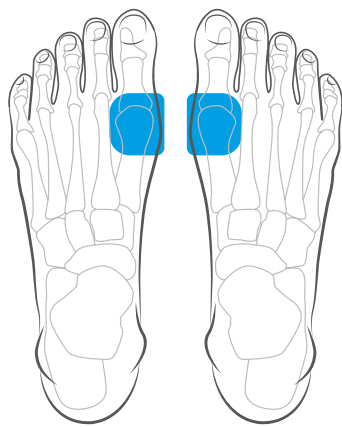

Wsparcie głowy
I/V kości śródstopia


Symbol	Materiał	Wysokość	Długość/szerokość [mm]		
			38 x 32 mm	43 x 37 mm	48 x 37 mm
Z1EVA-2	EVA	2 mm	1 35/36-37/38	2 39/40-43/44	3 45/46-47/48
Z1EVA-3	EVA	3 mm			
Z1PRN-3	Poron	3 mm			

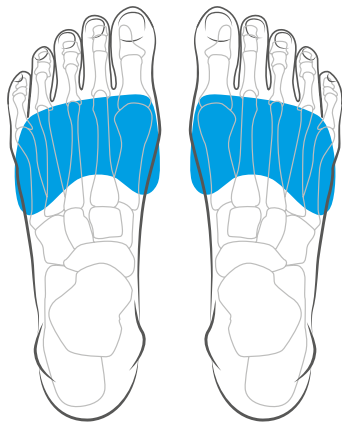

Odciążenie przodostopia


Symbol	Materiał	Wysokość	Długość/szerokość [mm]		
			86 x 68 mm	93 x 74 mm	100 x 77 mm
Z2OPRN-3	Poron	3 mm	1 35/36-39/40	2 41/42-43/44	3 45/46-47/48
Z2OMG-2	Mikroguma	2 mm			

ELEMENTY KORYGUJĄCE - pianka EVA, PORON, płyta żywiczna

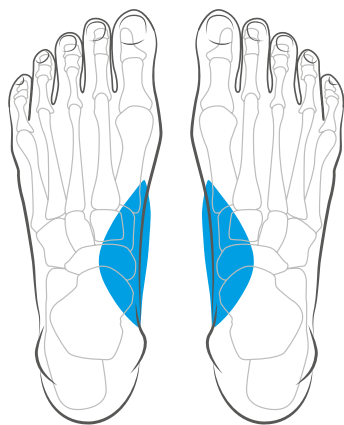


Wsparcie łuku podłużnego – „łezka”

			Długość/szerokość [mm]		
			90 x 33 mm	100 x 35 mm	115 x 40 mm
Symbol	Materiał	Wysokość	Rozmiary		
Z18EVA-2	EVA	2 mm	1 35/36	2 37/38-41/42	3 43/44-47/48
Z18EVA-3	EVA	3 mm			
Z18RG1.2	Pł. żywiczna	1,2 mm			

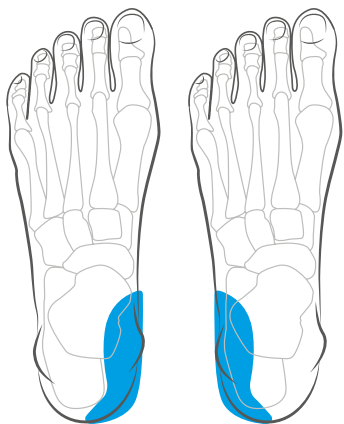


Supinator lub Pronator

			Długość/szerokość [mm]	
			71 x 21 mm	88 x 22 mm
Symbol	Materiał	Wysokość	Rozmiary	
Z11EVA-3-SUP	EVA340	3 mm	2 35/36-41/42	3 43/44-47/48
Z11EVA-5-SUP	EVA540	5 mm		
Z11EVA-10-SUP	EVA1040	10 mm		
Z12EVA-3-PRO	EVA340	3 mm		
Z12EVA-5-PRO	EVA540	5 mm		
Z12EVA-10-PRO	EVA1040	10 mm		

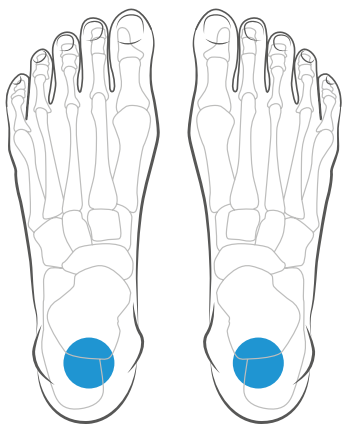

Odciążenie pięty


Symbol	Materiał	Wysokość	Średnica [mm]		
Z21PRN-3	Poron	3 mm	30	35	44
Z21EVA-3	EVA 316	3 mm			

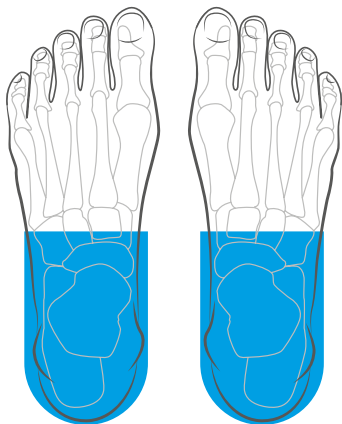

Wyrównanie skrętu


			Długość/szerokość [mm]			
			110 x 53 mm	112 x 58 mm	112 x 64 mm	113 x 70 mm
Symbol	Materiał	Wysokość	Rozmiary			
Z13EVA-5	EVA	5 mm	1 35/36	2 37/38-39/40	3 41/42-43/44	4 45/46-47/48
Z13EVA-10	EVA	10 mm				
Z13EVA-15	EVA	15 mm				

ELEMENTY KORYGUJĄCE - LATEX

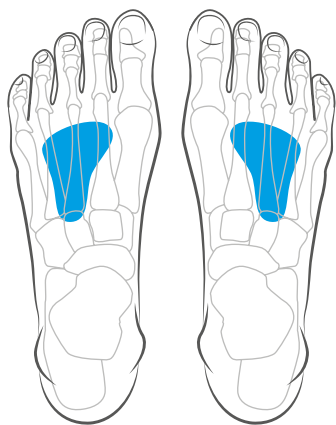


7443

Rozmiar	1	2	3	4
Symbol	P-7443-1	P-7443-2	P-7443-3	P-7443-4
Wysokość	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm
Szerokość	46 mm	48 mm	55 mm	61 mm
Długość	67 mm	71 mm	75 mm	80 mm
Rozmiar stopy	35/36	37/38-39/40	41/42-43/44	45/46-47/48

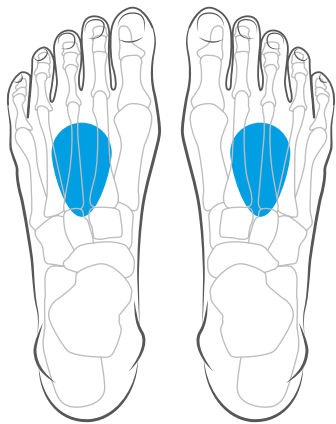


7444

Rozmiar	1	2	3
Symbol	P-7444-1	P-7444-2	P-7444-3
Wysokość	8 mm	8 mm	11 mm
Szerokość	34 mm	35 mm	38 mm
Długość	47 mm	50 mm	54 mm
Rozmiar stopy	35/36-37/38	39/40-41/42	43/44-45/46

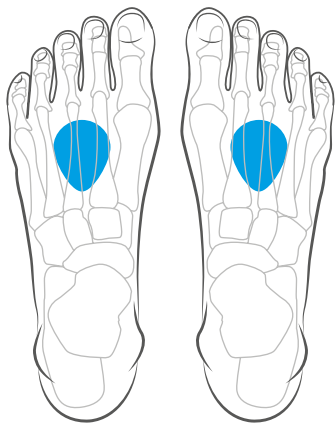


12

Rozmiar	1
Symbol	P-12
Wysokość	3 mm
Szerokość	36 mm
Długość	50 mm
Rozmiar stopy	31/32-35/36

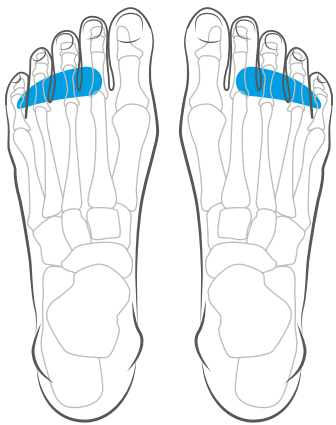

12927-16









Rozmiar	16
Symbol	P-12927-16
Wysokość	7 mm
Szerokość	18 mm
Długość	55 mm
Rozmiar stopy	35/36-47/48

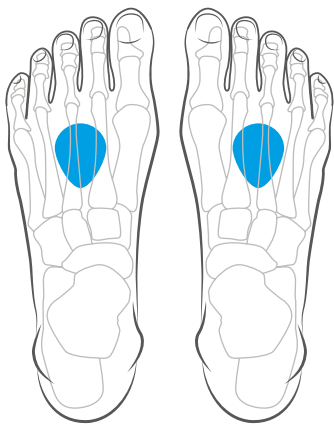

3917







Rozmiar	1	2
Symbol	P-3917-1	P-3917-2
Wysokość	5 mm	6 mm
Szerokość	41 mm	44 mm
Długość	57 mm	60 mm
Rozmiar stopy	35/36-41/42	43/44-47/48

MATERIAŁY DO TWORZENIA KOREKT

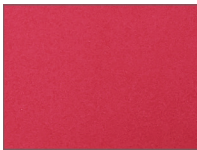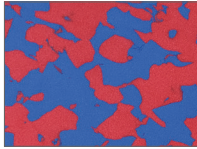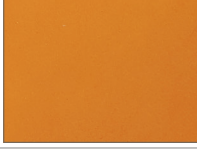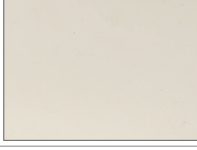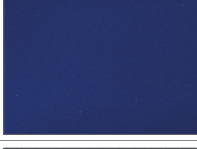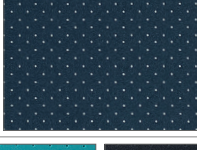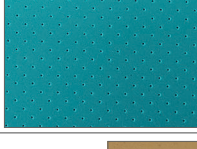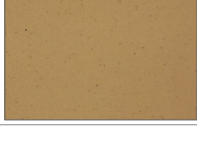SYMBOL - ROZMIAR - KOLOR	MATERIAŁ	OPIS*
EV225FR - 330 x 235 mm - czerwony EV225MR - 1250 x 1000 mm - czerwony		Płyta EVA 25ShA Grubość: 2 mm
EV230FM - 330 x 235 mm - moro EV230MM - 1250 x 1000 mm - moro EV230FY - 330 x 235 mm - żółty EV230MY - 1250 x 1000 mm - żółty	 	Płyta EVA 30ShA Grubość: 2 mm
EV260FB - 330 x 235 mm - czarny EV260MB - 1030 x 1030 mm - czarny		Płyta EVA 60ShA Grubość: 2 mm
EV316FO - 330 x 235 mm - pomarańczowy EV316MO - 1150 x 950 mm - pomarańczowy		Płyta EVA 16ShA Grubość: 3 mm
EV320FW - 330 x 235 mm - biały EV320MW - 1150 x 950 mm - biały		Płyta EVA 20ShA Grubość: 3 mm
EV330FB - 330 x 235 mm - jasny niebieski EV330MB - 1100 x 950 mm - jasny niebieski		Płyta EVA 30ShA Grubość: 3 mm
EV340FN - 330 x 235 mm - granatowy EV340MN - 1100 x 950 mm - granatowy		Płyta EVA 40ShA Grubość: 3 mm
EV230FNP - 330 x 235 mm - granatowy EV230MNP - 2100 x 1050 mm - granatowy		Płyta EVA 35ShA Grubość: 2 mm
EV330FNP - 330 x 235 mm - granatowy EV330MNP - 2100 x 1050 mm - granatowy		Płyta EVA 30ShA Grubość: 3 mm
EV240FGP - 330 x 235 mm - zielony EV240MG - 1100 x 940 mm - zielony EV240FNP - 330 x 235 mm - ciemny granatowy EV240MNP - 1100 x 940 mm - ciemny granatowy	 	Płyta EVA 40ShA Grubość: 2 mm
EV545FS - 330 x 235 mm - beżowy EV545MS - 2000 x 1000 mm - beżowy		Płyta EVA 45ShA Grubość: 5 mm
EV1045FS - 330 x 235 mm - beżowy EV1045MS - 2000 x 1000 mm - beżowy		Płyta EVA 45ShA Grubość: 10 mm

PIANKA EVA - skrót

PLĘTA ŻYWICZNA

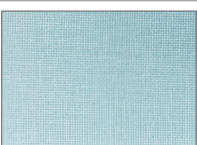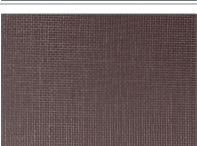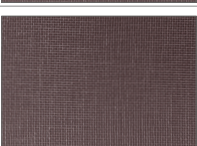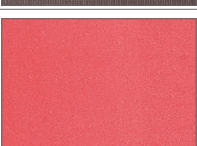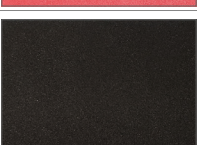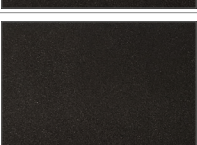SYMBOL - ROZMIAR - KOLOR	MATERIAŁ	OPIS*
RG1.0F - 330 x 235 mm RG1.0M - 750 x 1000 mm		Płyta żywiczna Grubość: 1 mm
RG1.2F - 330 x 235 mm RG1.2M - 750 x 1000 mm		Płyta żywiczna Grubość: 1,2 mm
RG1.4F - 330 x 235 mm RG1.4M - 750 x 1000 mm		Płyta żywiczna Grubość: 1,4 mm
RG1.6F - 330 x 235 mm RG1.6M - 750 x 1000 mm		Płyta żywiczna Grubość: 1,6 mm
RG1.8F - 330 x 235 mm RG1.8M - 750 x 1000 mm		Płyta żywiczna Grubość: 1,8 mm
RZ1.0F - 330 x 235 mm RZ1.0M - 750 x 1000 mm		Płyta żywiczna Grubość: 1,0 mm
RZ1.2F - 330 x 235 mm RZ1.2M - 750 x 1000 mm		Płyta żywiczna Grubość: 1,2 mm
PRN3FO - 330 x 235 mm - czerwony PRN3MO - 1370 x 1000 mm** - czerwony		8ShA Grubość: 3 mm
AM210F - 330 x 235 mm - czarny AM210M - 2000 x 1000 mm - czarny		Pianka amortyzująca 10ShA Grubość: 2 mm
AM310F - 330 x 235 mm - czarny AM310M - 2000 x 1000 mm - czarny		Pianka amortyzująca 10ShA Grubość: 3 mm
TA2G-50 - Taśma dwustronnie klejąca		szer. 100 mm dług. 50 m gru. 0,15 mm
GL600-1 - Klej SAR 600		1 kg

MATERIAŁY DO ODCIĄŻEŃ

DODATKOWE

*Tolerancja wymiaru i grubości materiału +/- 0,3 mm.
**Poron sprzedawany na mb. Wysokość rolki 1,37 m.

Mazbit

SZKOLENIA

OD 1992



DIAGNOSTYKA STÓP I POSTAWY CIAŁA

**OBSŁUGA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ
POTRZEBNYCH DO WYKONYWANIA WKŁADEK**

**DOBÓR ODPOWIEDNIH BAZ I ELEMENTÓW
KOREKCYJNYCH**

FORMOWANIE I OBRÓBKĄ WKŁADEK

WSKAZÓWKI DO PRACY Z PACJENTEM

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Wiktor Frąckowiak

Technik ortepeda, Podolog

Zadzwoń +48 519 109 052

Napisz w.frackowiak@mazbit.pl



ANATOMIA STAWU SKOKOWEGO I STOPY

**DIAGNOSTYKA W OBRĘBIE
STAWU SKOKOWEGO I STOPY**

BIOMECHANIKA CHODU

**WARSZTATY PRAKTYCZNE Z DIAGNOSTYKI
I PROJEKTOWANIA WKŁADEK
ORTOPEDYCZNYCH NA ZAMÓWIENIE**

KINESIOTAPING PODOLOGICZNY



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Antonina Kozłowska

Podolog, Konsultant Medyczny

Zadzwoń +48 609 864 635

Napisz gabinety@mazbit.pl



SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE TERMINY NA MAZBIT.PL/SZKOLENIA



OD 1992

ul. R. Szlafroka 18, PL 63-000 Środa Wlkp.
tel. +48 61 285 13 07
e-mail: biuro@mazbit.pl
www.mazbit.pl

